



AcryPlus **evo**

DENTI ARTIFICIALI

Made in Italy



**Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Lo difendiamo con i denti.

Con AcryPlusEvo difendiamo il lavoro dei professionisti del sorriso.

AcryPlusEvo

Qualità dei materiali, estetica, morfologia oclusale naturale e impiego pratico ed intuitivo sono le premesse del nostro lavoro per aiutarvi ad ottenere i migliori risultati in:

- PROTESI TOTALE
- PROTESI OVERDENTURE
- TORONTO BRIDGE
- ALL ON FOUR
- PROTESI SU BARRA





Estetica

Il taglio di colletto, dentina e smalto in stratificazione multistrato, dona traslucenza naturale.

Tessitura e caratterizzazione realizzate con le più avanzate tecnologie CAD-CAM conferiscono naturalezza al manufatto.

Le forme larghe dei colletti permettono una migliore adattabilità estetica in protesi con strutture sottostanti.

Forme degli incisivi e molari di grande dimensione aggiungono naturalezza estetica alla protesi.

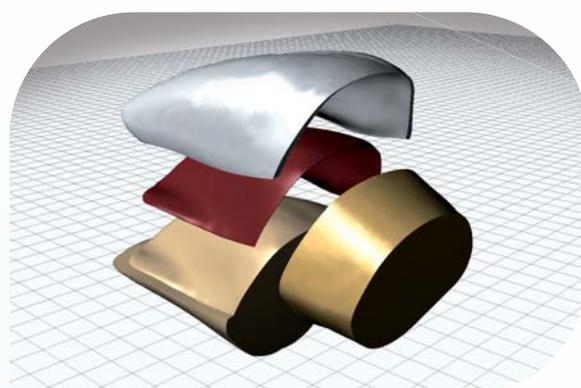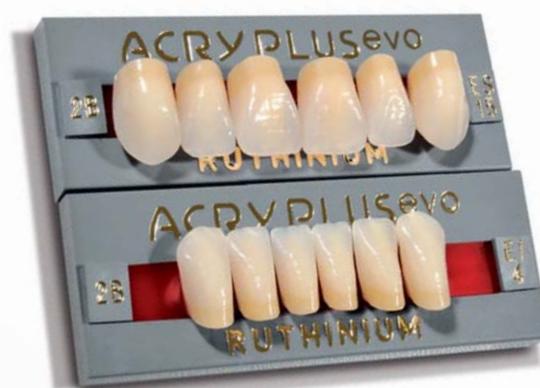

Tecnologia



Elasticità della resina: il dente in resina in PMMA ha un'elevata elasticità che permette un'efficace resistenza al carico masticatorio.

Elevata resistenza all'abrasione: l'impiego di resine ad alto peso molecolare, garantisce una prolungata resistenza nel tempo del prodotto.

L'impiego di PMMA come prodotto di base, garantisce un perfetto legame tra dente e resina per palati, eliminando l'inconveniente del distacco di singoli elementi dalla protesi.




Molecole di PMMA

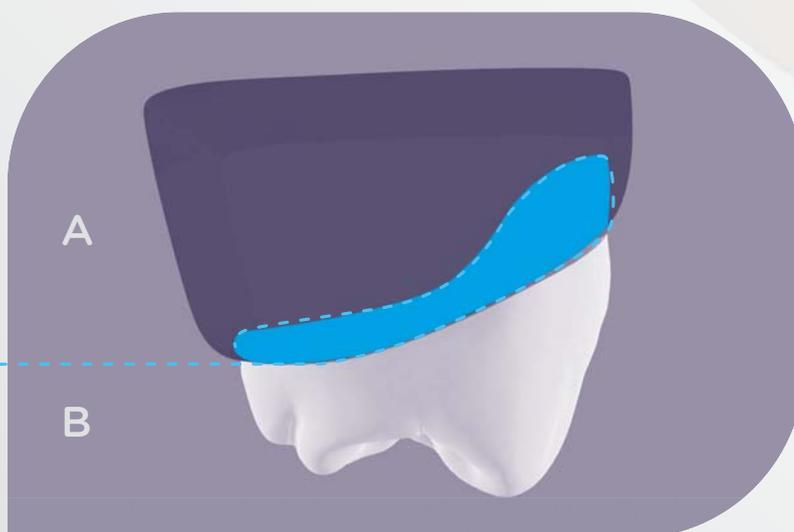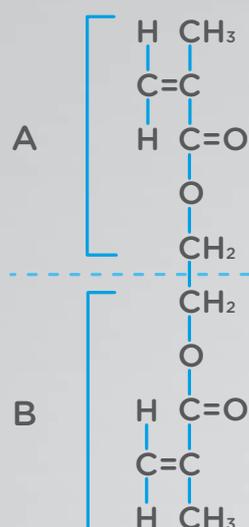

Impiego

L'anatomia dei posteriori è sviluppata per ottenere le curve di Wilson e Spee in modo semplice ed immediato.

La particolare forma nella zona del colletto dei posteriori, ED2-ED4-ED6 semplifica e velocizza la realizzazione del montaggio, evitando il molaggio del tallone del dente.

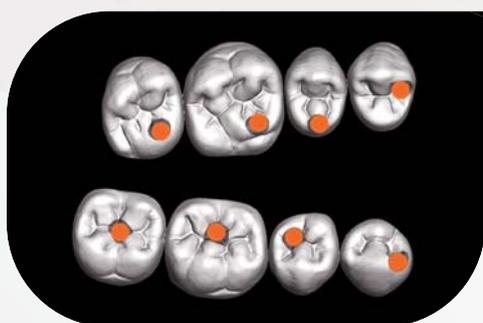

Vantaggi


L'occlusione dente a dente riduce i punti di contatto limitando i traumi per le strutture sottostanti la protesi.

La riduzione dei contatti tra denti antagonisti riduce la possibilità di stress muscolare, evitando patologie a carico del sistema stomatognatico.

Tavola forme



CODICE PRODOTTO	
0120036	ACRY PLUS EVO 6 UPPER
0120037	ACRY PLUS EVO 6 LOWER
0120038	ACRY PLUS EVO 8 UPPER
0120039	ACRY PLUS EVO 8 LOWER
0120042	ACRY PLUS EVO SET 28 DENTI

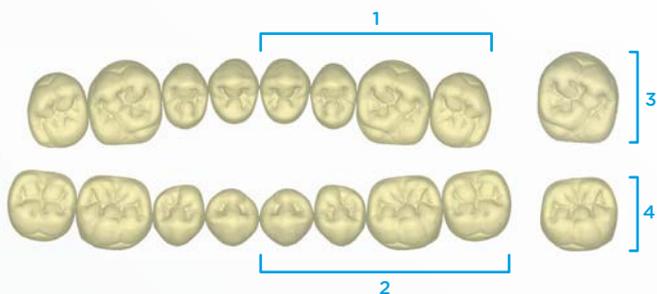

COLORAZIONI DISPONIBILI



A1	A2	A3	A3,5	A4	B2
C1	C3	D2	D3		
1A	2A	3A	4A	2B	1D

A1 - A2 - B2 - 1A - 2A	WHITE
A3 - A3,5 - 1D - 2B	YELLOW
A4 - 3A	LIGHT BROWN
4A - C1 - D2 - D3	GREY
C3	DARK BROWN

TABELLA DI ARTICOLAZIONE *

INCISIVI SUPERIORI	INCISIVI INFERIORI	POSTERIORI
ES3	EI2	ED2-ED14
ES5	EI4	ED2-ED4-ED14-ED17
ES8	EI4-EI5	ED4-ED17
ES10	EI7	ED4-ED6-ED17-ED20
ES12	EI5-EI7	ED4-ED17
ES15	EI7-EI9	ED4-ED6-ED17-ED20
ES17	EI9	ED6-ED20
ES18	EI7-EI9	ED6-ED20

* Le combinazioni sono indicative.
La tipologia del montaggio e il caso clinico possono richiedere combinazioni diverse.

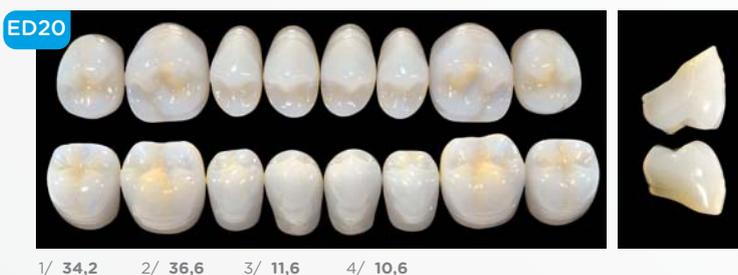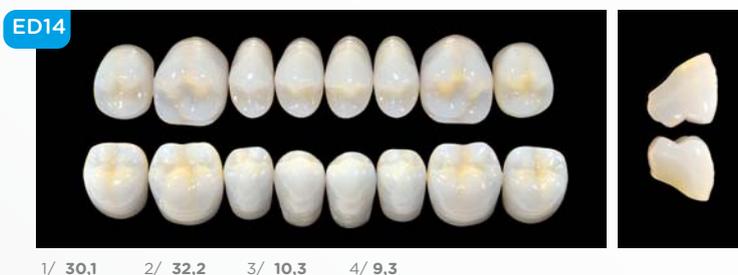

Posteriori anatomici del tutto simili al dente naturale e caratterizzati da un'intercuspidazione dente a dente con un unico punto di contatto. Angolo delle cuspidi di 45°



We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.
Via Ca' Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine (RO) - Italy

T (0039) 0425 51628 - (0039) 0425 590587
F (0039) 0425 590156
info@ruthinium.it - www.ruthinium.it

AP02.15.1